

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA



CATALOGUE **UROLOGIE & SOIN RECTAL**

Le spécialiste de la distribution
de dispositifs médicaux à usage unique.

Edition 2025

BIENVENUE

CHEZ KELIS MEDICAL - APOTECNIA

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



ÉQUIPE TERRAIN

Un interlocuteur unique pour toutes vos demandes, grâce à une équipe réactive et à un commercial implanté dans votre région.



EXPÉDITION RAPIDE

Nous nous engageons à traiter vos commandes dans les 24 à 48 heures.



RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Sélection de consommables adaptés à vos besoins : marques renommées, génériques de qualité, tarifs compétitifs.



FLÉXIBILITÉ

Quantités et produits ajustés à vos besoins avec un catalogue constamment mis à jour. Solution personnalisée pour un service optimal.

SOMMAIRE

04

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les sondes urinaires	04
Les poches urinaires	06
Lexique	18

09

UROLOGIE

Sonde intermittente - Non lubrifiée	09
Sonde de Foley - Latex siliconé	10
Sonde de Foley - 100% silicone	10
Sonde de Foley préconnectée - Latex siliconé	11
Sonde de Foley préconnectée - 100% silicone	11
Système urinaire préconnecté	12
Poche à urine	12
Poche de vidange C3 avec gélifiant SAP	13
Gélifiant SAP	13
Poche urinaire stérile avec site de prélèvement	14
Tubulure d'irrigation pour sonde urinaire	14
Crochet pour poche urinaire	14
Fosset pour sonde urinaire	15
Pot de recueil urinaire vacutainer	15
Tube vacutainer pour prélèvement urinaire	15

16

SOIN RECTAL

Sonde rectale	16
Kit de lavement flexible non stérile	16

17

SETS DE SOINS URINAIRE

Set de sondage urinaire a demeure	17
Set de sondage urinaire	17

LES SONDES URINAIRES

COMMENT CHOISIR ?

Votre choix dépendra de vos besoins : nature de l'application, la nécessité de stérilité, la réutilisation envisagée et les considérations budgétaires.

SONDAGE INTERMITTENT


Pose d'une sonde vésicale pour assurer un drainage ponctuel

- Insertion par le méat jusqu'à la vessie
- Unique (chirurgie) ou répété (sclérose en plaque, paraplégie...)
- Retiré à la fin de la vidange

2 types de sondage intermittent :

Autosondage par le patient

Hétérosondage réalisé par une tierce personne formée (IDE...)

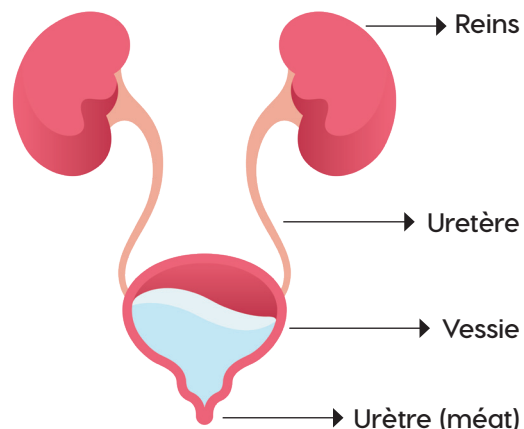

SONDAGE À DEMEURE


Pose de sonde à ballonnet pour assurer un drainage continu

- Aussi appelé **Sonde de Foley**.
- En système clos = sonde + collecteur assemblés
- **Risque infectieux** : à la pose et une fois en place

CHOISIR UNE SONDE ET MIEUX COMPRENDRE VOS BESOINS

Afin de mieux vous accompagner dans le choix de la sonde urinaire à utiliser, nous vous proposons un arbre décisionnel qui vous aidera à clarifier les différentes options disponibles et évaluer vos choix en fonction des critères prédéfinis correspondant à vos besoins.


CHOIX POUR LE SONDAGE URINAIRE

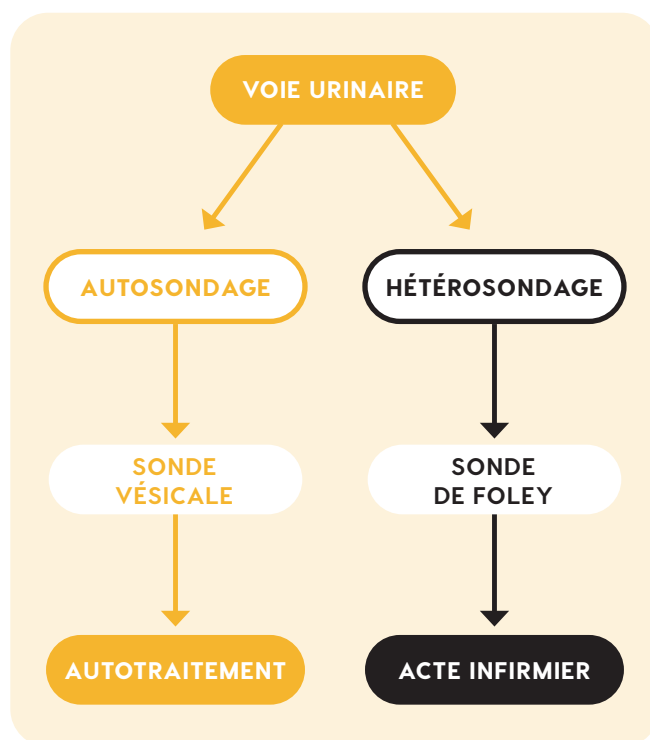


	INTERMITTENTE	À DEMEURRE
MATÉRIAU	PVC (auto)lubrifiant	- Latex siliconé / téflon : 7-15 jours - Latex + hydrogel 100% silicone 4-6 semaines
LONGUEUR	18 - 23 - 38 - 40 cm ♀ ♂	28 - 30 - 40 cm
DIAMÈTRE EXTERNE	CH06 - CH18	CH06 - CH18
ASPECT	Béquillée ou droite - Type Nelaton : droite ♀ ♂ - Type Tiemann : béquillée ♂	
EXTRÉMITÉ DISTALE	Sans ballonnet	Avec ballonnet - Matériau : latex ou silicone - Gonflage : eau stérile (<i>pas sérum phy.</i>) - Volume remplissage : 3-50ml - Avec valve anti-retour (<i>remplissage</i>)
EXTRÉMITÉ PROXIMALE	Godet	
TYPE	Classe I, stérile	

LES SONDES DE FOLEY

SIMPLE COURANT | DRAINAGE

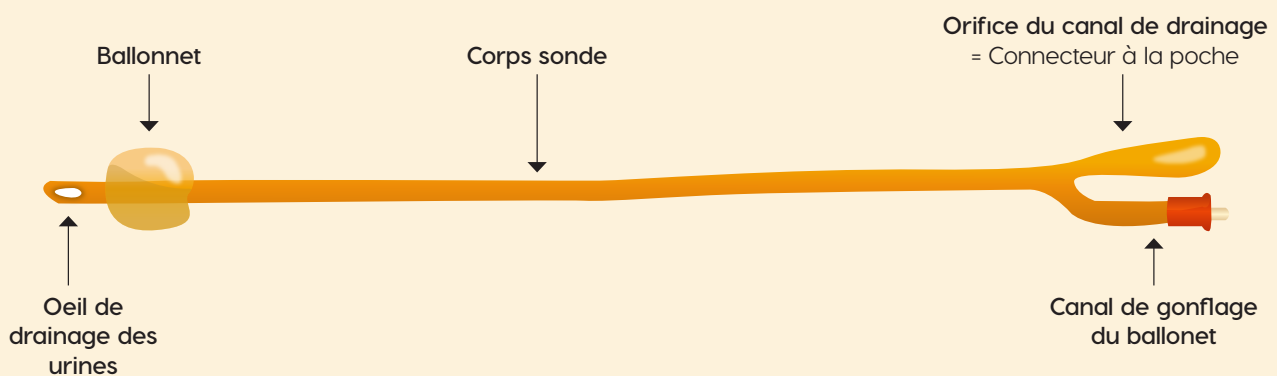

DOUBLE COURANT | IRRIGATION

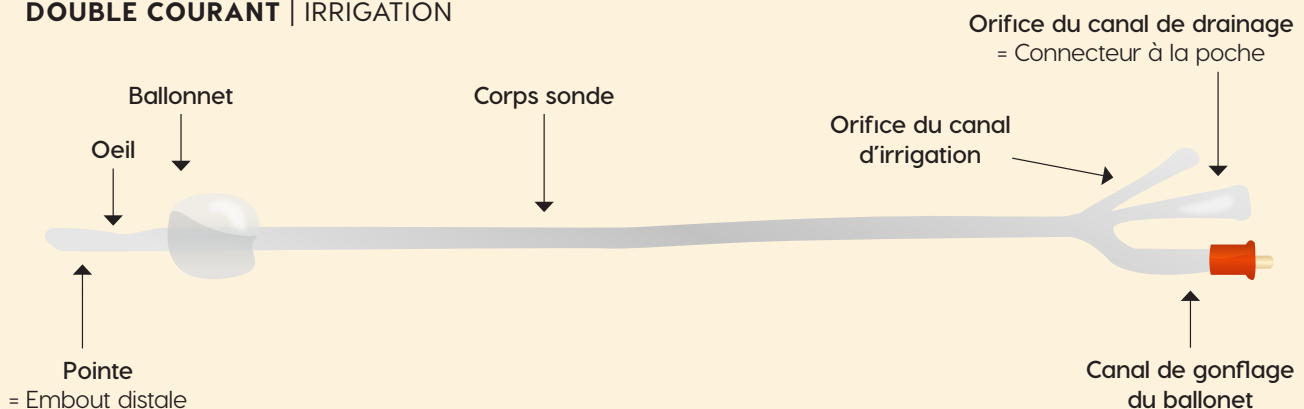

LES POCHE URINAIRES

COMMENT CHOISIR ?

Votre choix dépendra de vos besoins : nature de l'application, la nécessité de stérilité, la réutilisation envisagée et les considérations budgétaires.

La poche urinaire (ou collecteur d'urine) est destinée à être raccordée à :

- Une sonde urinaire
- Un étui pénien
- Un cathéter sus-pubien
- Une poche de stomie urinaire

Certaines poche urinaires non-stériles peuvent être utilisées en digestif

LES DIFFÉRENTES TYPES DE POCHE


- **Poche stérile intérieur uniquement** (extérieur non stérile) = poche « non stérile »*
- **Poche stérile intérieur et extérieur** = poche « stérile »
- Poche avec / sans site de prélèvement, chambre compte-gouttes, filtre...
- **Urimètre** : spécifique à la surveillance de la diurèse horaire

* La poche de récupération sert à vidanger la poche urinaire en place

LE SYSTÈME LOS

Système clos = aucune déconnexion entre la sonde urinaire et la poche urinaire

- Concerne le **sondage à demeure**
- **Recommandation R76 de la SF2H :**
 - La SAD doit être connectée à un sac collecteur stérile permettant un drainage clos
 - S'assurer que le système ne peut être déconnecté en dehors d'impératifs cliniques (changement de sac selon les recommandations du fabricant...).

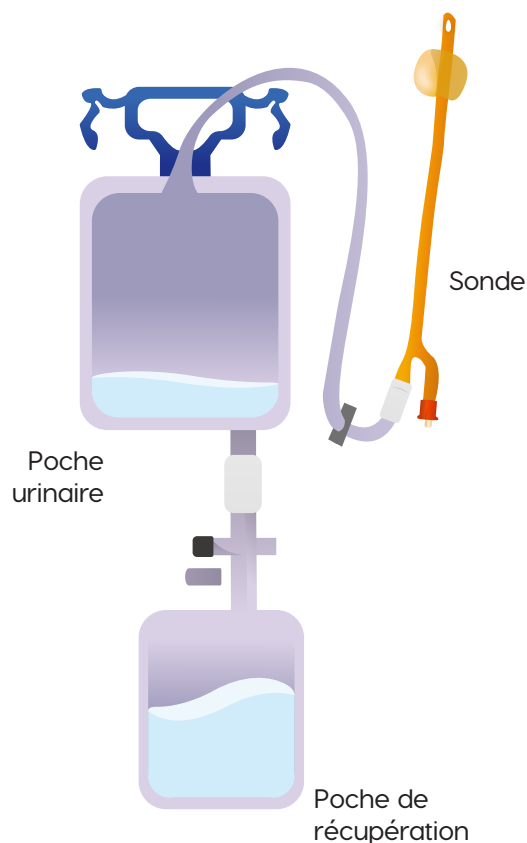

INFORMATIONS TECHNIQUES

La durée maximale d'utilisation varie selon le type de poche et les données fabricant indiquées dans la notice.



1 SEMAINE

POCHE AVEC
VALVE ANTI-REFLUX

POCHE AVEC
VALVE ANTI-REFLUX
+ CHAMBRE COMPTE-GOUTTES

	POCHE NON STÉRILE	POCHE STÉRILE
INDICATION	Intermittent	À demeure
AUTO INDICATION	Etui pénien	-
CONTENANCE	2L	2L - 4L - 5L
SYSTÈME DE VIDANGE	✓ ou ✗ - Robinet push & pull - Robinet en croix	✓ - Robinet push & pull - Robinet en croix - Robinet pince crocodile
VALVE ANTI-REFLUX*	✓ ou ✗	✓
CHAMBRE DE GOUTTAGE	✗	✓
CONDITIONNEMENT	En vrac ou individuellement	Individuellement

RECOMMANDATIONS DES BONNES PRATIQUES

	CARACTÉRISTIQUES		INDICATIONS			
	VALVE ANTI-REFLUX	CHAMBRE DE GOUTTAGE	UTILISATION ÉTUI PÉNIEN	SONDAGE INTERMITTENT	SONDAGE À DEMEURE	
					- 1 SEMAINE	+ 1 SEMAINE
POCHES NON STÉRILES	✓	✗	✓	✓	✗	✗
	✗	✗	✓	✓	✗	✗
POCHES STÉRILES	✓	✗	✗	✗	✓	✗
		✓	✗	✗	✓	✓

Les sondes urinaires intermittentes PENNINE sont conçus pour le drainage temporaire de la vessie par sondage transurétral.


Disponibles en versions féminine et masculine.

Modèle Féminin

- 18 cm (court) ou 23 cm (standard)
- Embout arrondi souple pour insertion atraumatique
- Deux œils latéraux pour drainage optimal
- PVC sans DEHP

Modèle Masculin

- 38 cm (standard)
- Type Nelaton
- Embout arrondi souple
- Deux œils latéraux
- PVC sans DEHP

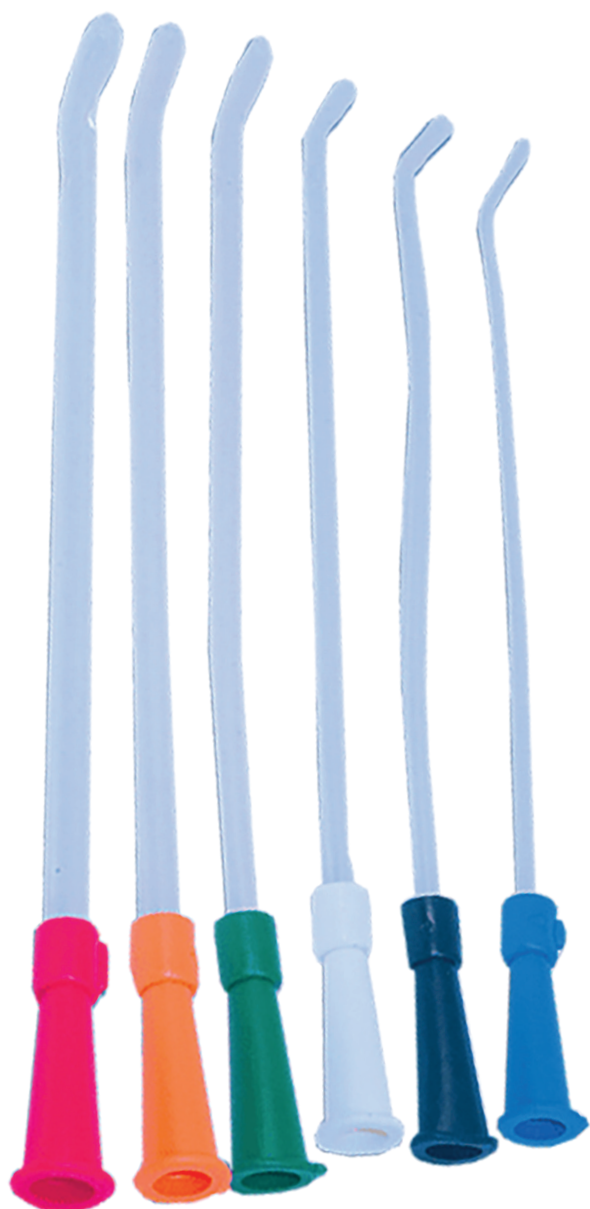

REF. FC-1406/1

Boîte de 100 UVC

CH06 - 23CM | FÉMININ (VERT CLAIR)

REF. FC-1408/1

Boîte de 100 UVC

CH08 - 23CM | FÉMININ (BLEU CLAIR)

REF. FC-1410/1

Boîte de 100 UVC

CH10 - 23CM | FÉMININ (NOIR)

REF. FC-1412/1

Boîte de 100 UVC

CH12 - 23CM | FÉMININ (BLANC)

REF. FC-1414/1

Boîte de 100 UVC

CH14 - 23CM | FÉMININ (VERT FONCÉ)

REF. FC-1416/1

Boîte de 100 UVC

CH16 - 23CM | FÉMININ (ORANGE)

REF. FC-1418/1

Boîte de 100 UVC

CH18 - 23CM | FÉMININ (ROUGE)

REF. NC-1208/SW/1

Boîte de 100 UVC

CH08 - 38CM | MASCULIN (BLEU CLAIR)

REF. NC-1210/SW/1

Boîte de 100 UVC

CH10 - 38CM | MASCULIN (NOIR)

REF. NC-1212/SW/1

Boîte de 100 UVC

CH12 - 38CM | MASCULIN (BLANC)

REF. NC-1214/SW/1

Boîte de 100 UVC

CH14 - 38CM | MASCULIN (VERT FONCÉ)

REF. NC-1216/SW/1

Boîte de 100 UVC

CH16 - 38CM | MASCULIN (ORANGE)

REF. NC-1218/SW/1

Boîte de 100 UVC

CH18 - 38CM MASCULIN (ROUGE)



SONDE DE FOLEY - LATEX SILICONÉ

La sonde de Foley Securdrain Vià en latex siliconé offre une solution fiable et confortable pour le sondage urinaire de courte à moyenne durée. Son revêtement en silicone assure une excellente tolérance et réduit les risques d'irritation.



REF. 11601322121

Boite de 10 UVC

CH12 41CM | LATEX SILICONÉ

REF. 11601322141

Boite de 10 UVC

CH14 41CM | LATEX SILICONÉ

REF. 11601322161

Boite de 10 UVC

CH16 41CM | LATEX SILICONÉ

REF. 11601322181

Boite de 10 UVC

CH18 41CM | LATEX SILICONÉ

REF. 11601322201

Boite de 10 UVC

CH20 41CM | LATEX SILICONÉ


SONDE DE FOLEY - 100% SILICONE

La Sonde de Foley en 100% Silicone Securdrain Vià! est idéale pour les utilisations à longue durée (29 jours) et pour les patients allergiques au latex, grâce à la biocompatibilité du matériau.

REF. 11501222121

Boite de 20 UVC

2 VOIES | CH12 21CM • 100% SILICONE

REF. 11501322121

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH12 41CM • 100% SILICONE

REF. 11501322141

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH14 41CM • 100% SILICONE

REF. 11501322161

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH16 41CM • 100% SILICONE

REF. 11501322181

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH18 41CM • 100% SILICONE

REF. 11501322201

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH20 41CM • 100% SILICONE

REF. 11501322221

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH22 41CM • 100% SILICONE




SONDE DE FOLEY PRÉCONNECTÉE - LATEX SILICONÉ

Système de drainage urinaire clos préconnecté, prêt à l'emploi, stérile, composé d'une poche de recueil graduée 2000 ml avec robinet de vidange en T, valve anti-reflux, tubulure souple 90 cm et site de prélèvement sans aiguille.

La sonde en latex recouvert de silicone offre une bonne tolérance et une grande souplesse pour un confort optimal. Ballonnet 5 à 15 ml. Usage unique.



REF. 0100111C22BB

Boite de 50 UVC

SYST URI PRECO 2 LITRES | CH14 • 90CM SONDE LATEX

REF. 0100111C22BC

Boite de 50 UVC

SYST URI PRECO 2 LITRES | CH16 • 90CM SONDE LATEX

REF. 0100111C22BD

Boite de 50 UVC

SYST URI PRECO 2 LITRES | CH18 • 90CM SONDE LATEX



SONDE DE FOLEY PRÉCONNECTÉE - 100 % SILICONE

Système de drainage urinaire clos préconnecté, prêt à l'emploi et stérile, avec poche de recueil 2 000 ml et sonde de Foley 100 % silicone, sans latex ni DEHP.

Tubulure souple de 90 cm, valve anti-reflux, site de prélèvement sans aiguille, robinet de vidange en T manipulable à une main.



REF. 0100112E21CA

Boite de 40 UVC

POCHE 2 LITRES | CH12 • 90CM SONDE 100% SILICONE

REF. 0100112E21CB

Boite de 40 UVC

POCHE 2 LITRES | CH14 • 90CM SONDE 100% SILICONE

REF. 0100112E21CC

Boite de 40 UVC

POCHE 2 LITRES | CH16 • 90CM SONDE 100% SILICONE

REF. 0100112E21CD

Boite de 40 UVC

POCHE 2 LITRES | CH18 • 90CM SONDE 100% SILICONE

REF. 0100112E21CE

Boite de 40 UVC

POCHE 2 LITRES | CH20 • 90CM SONDE 100% SILICONE



SYSTÈME URINAIRE PRÉCONNECTÉ

Dispositif prêt à l'emploi combinant une poche de recueil en forme de goutte et une sonde de Foley 2 voies en silicone. La sonde est maintenue par un ballonnet gonflé avec de l'eau stérile ou du sérum physiologique.

La poche se fixe facilement au lit, avec vidange par tubulure et clamp. Prélèvement possible via un site dédié. Valve anti-reflux et événements intégrés pour un drainage fluide et sécurisé.

Boîte de 20 UVC



REF. M06059

SYST URI PRECO | CH12

REF. M06061

Boîte de 20 UVC

SYST URI PRECO | CH14

REF. M06062

Boîte de 20 UVC

SYST URI PRECO | CH16

REF. M06063

Boîte de 20 UVC

SYST URI PRECO | CH18

REF. M06064

Boîte de 20 UVC

SYST URI PRECO | CH20



POCHES À URINE

Conçue pour garantir une collecte urinaire efficace, hygiénique et confortable. Fabriquées en PVC médical sans DEHP ni latex, elles conviennent parfaitement aux environnements hospitaliers et aux soins à domicile. Chaque modèle répond à un usage spécifique, tout en assurant une compatibilité universelle avec les sondes urinaires.

REF. 001019017903

Boîte de 200 UVC

POCHE 2 LITRES | VIDANGEABLE AVEC VALVE ANTIREFLUX

Idéale pour les usages prolongés.

- Vidangeable : Oui (robinet à déclic ou à croix)
- Valve antireflux : Oui
- Tubulure : 90 cm

REF. 001019037903

Boîte de 200 UVC

POCHE 2 LITRES | NON VIDANGEABLE

Simple et économique pour un usage unique. Se remplace une fois pleine.

- Vidangeable : Non
- Valve antireflux : Non
- Tubulure : 90 cm

REF. 008019017107

Boîte de 400 UVC

POCHE DE RÉCUPÉRATION | AVEC VALVE ANTIREFLUX

Utilisée en complément d'un autre dispositif, elle permet de recueillir l'urine en toute sécurité.

- Vidangeable : Non
- Valve antireflux : Oui
- Tubulure : 10 cm





POCHE DE VIDANGE C3 AVEC GÉLIFIANT SAP



La poche de vidange C3 CURAS™ est conçue pour vider les poches à urine de manière sécurisée et hygiénique. Équipée du système Flexi-Funnel™ et d'un crochet de suspension Cross-Hanger™, elle garantit une connexion stable et sans fuite.

Le sachet SAP intégré permet d'absorber les fluides recueillis en les transformant en gel, évitant ainsi les éclaboussures et limitant les risques de contamination.

- Vidange propre et sécurisée des poches à urine
- Réduction du risque infectieux (système fermé)
- Absorption des liquides par SAP, pas de déversement
- Facile à manipuler grâce au bec verseur intégré

REF. 20465

Boîte de 25 UVC

POCHE 1,5 LITRES

Pour les petits volumes d'urine ou les soins de courte durée.

REF. 20469

Boîte de 25 UVC

POCHE 2 LITRES | MODÈLE PLUS

Modèle standard renforcé, recommandé pour un usage quotidien en milieu hospitalier.

REF. 20470

Boîte de 25 UVC

POCHE 2 LITRES | DEHP-FREE

Version sans DEHP, adaptée aux établissements sensibles à la composition des plastiques.



GÉLIFIANT SAP

Le gélifiant SAP by Curas™ est un polymère super-absorbant conçu pour la prise en charge des déchets liquides d'origine clinique. Il permet de transformer rapidement les fluides corporels (urine, vomissures, exsudats, etc.) en un gel ferme, non renversable et à faible odeur, facilitant ainsi la manipulation, la sécurité et l'élimination des déchets.

REF. 08100

Boîte de 25 UVC

SACHET 6G

REF. 08101

Boîte de 1 UVC

BOUTEILLE





POCHE URINAIRE STÉRILE AVEC SITE DE PRÉLÈVEMENT



La poche urinaire offre une capacité de 2, 4 ou 5 litres. Une construction sûre en PVC sans latex ni DEHP, avec une tubulure à section large pour éviter les obstructions, et un robinet en «T» facilitant la vidange. Stérilisée avec un mélange d'ETO + CO2.

REF. 001011067908

Boite de 50 UVC

POCHE 2 LITRES | ROBINET + VALVE + AIGUILLE • SM4L

REF. 00101106790D

Boite de 100 UVC

POCHE 2 LITRES | ROBINET + VALVE • SM4L

Robinet de vidange en T

REF. 004011E17903

Boite de 20 UVC

POCHE 2 LITRES | ROBINET + VALVE • SM7

Robinet de vidange en croix avec chambre de gouttage antibactérienne et filtre à air

REF. 004011G1A903

Boite de 20 UVC

POCHE 4 LITRES | ROBINET + VALVE • SM4000C

Robinet de vidange en « T » avec chambre de gouttage antibactérienne et filtre à air

REF. 004011C2B903

Boite de 20 UVC

POCHE 5 LITRES | ROBINET + VALVE • SM5000C

Robinet de vidange en « T » avec chambre de gouttage antibactérienne et filtre à air

Bexen

TUBULURE D'IRRIGATION POUR SONDE URINAIRE



Équipement pour l'irrigation urologique avec perforateur et chambre, régulateur de débit et extrémité distale avec un raccord en silicone lubrifié. Dispositif stérile utilisé dans l'irrigation par voie urologique d'une solution contenue dans une poche (091.01) ou de solutions contenues dans deux poches indépendantes (091.02).

REF. 091.01

Boite de 30 UVC

SIMPLE

REF. 091.02

Boite de 30 UVC

DOUBLE



CROCHET POUR POCHE URINAIRE

Crochet conçu pour assurer une fixation sûre de la poche à urine aux cadres de lit ronds ou carrés, ou à un fauteuil roulant.

REF. 514SUP05

Boite de 100 UVC

CROCHET POUR POCHE | PLASTIQUE





CURAS® FOSSET POUR SONDE URINAIRE

Fosset stérile en polypropylène médical, sans latex, compatible avec tous types de sondes. Dimensions : Ø 13 mm x 54 mm, connecteur Ø 5 mm.

REF. 20360

Boite de 100 UVC

FOSSET SPIGOT



recurmed FOSSET POUR SONDE URINAIRE

Fosset universel en PVC médical, conçu pour l'obturation temporaire des sondes. Longueur : 48 mm. Diamètre adaptable à toutes les tailles de sondes.

REF. 11201102001

Boite de 100 UVC

FOSSET BLEU | 45MM



BD POT DE RECUEIL URINAIRE VACUTAINER

Le système BD Vacutainer® simplifie et standardise la collecte d'urine en permettant un transfert direct vers les tubes identifiés par code couleur. Les échantillons peuvent être acheminés en toute sécurité au laboratoire, quel que soit le système de transport.

REF. 364941

Boite de 200 UVC

POT DE RECUEIL | VACUTAINER + CANULE • 120MM



BD TUBE VACUTAINER PRÉLÈVEMENT URINAIRE

Les tubes d'analyse d'urine en plastique BD Vacutainer™ facilitent la collecte et le transport des échantillons d'urine. Ils sont stériles et peuvent être évacués avec ou sans conservateur, et sont conçus pour être utilisés avec les dispositifs de prélèvement BD.

REF. 364955

Boite de 1000 UVC

TUBE VACU URI | 10ML





SONDE RECTALE

La sonde rectale Securflow Via! est indiquée pour l'administration de médicaments et aussi pour le drainage rectal. Il a une longueur de 40 cm, une extrémité ouverte et 2 yeux atraumatiques.

REF. 11214100401 Boîte de 100 UVC
CH18 - 40CM

REF. 11214100408 Boîte de 100 UVC
CH20 - 40CM

REF. 11214100402 Boîte de 100 UVC
CH22 - 40CM

REF. 11214100409 Boîte de 70 UVC
CH24 - 40CM

REF. 11214100410 Boîte de 70 UVC
CH26 - 40CM

REF. 11214100404 Boîte de 70 UVC
CH28 - 40CM

REF. 11214100405 Boîte de 70 UVC
CH30 - 40CM



KIT DE LAVEMENT FLEXIBLE NON STÉRILE

Poche de lavement souple de 1 500 ml avec valve anti-débordement. Utilisation à une main grâce à un entonnoir avec couvercle. Tube en vinyle de 150 cm avec embout pré-lubrifié, lisse et atraumatique. Inclus : savon de Castille doux et alèse imperméable. Non stérile, emballé individuellement.

REF. DYND70100A Boîte de 48 UVC
KIT DE LAVEMENT | 1500 ML

SETS DE SOINS URINAIRE

Innoset est un assembleur et distributeur de nécessaires de soins stériles depuis plus de 20 ans.

Intégrée au groupe Lavorel Medicare France depuis 2018, dont le siège social est situé à Lyon, Innoset est également reliée à la société Kelis Médical (distributeur de dispositifs médicaux à usage unique).

Située à Escalquens, la société Innoset a récemment développé son activité avec l'ouverture d'un nouveau site de production : Pharmaset.

Ce nouvel espace de 4800 m² est localisé à Sousse (Tunisie) et dispose d'une zone de stockage de plus de 3000 m².



SET DE SONDAGE URINAIRE A DEMEURE

RÉFÉRENCE : UR-SAD-01

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 2 x 5 Compresses Non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 50 x 60 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Pince Kocher
- 1 Champ patient Ouate fenêtré 10 cm centrée 75 x 75 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule EPPI 20 ml protégée

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT

2 SACHETS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

1 SAC DASRI




SET DE SONDAGE URINAIRE

RÉFÉRENCE : 516901

- 1 Champ patient Ouate 45 x 75 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ patient ouate 45 x 75 cm fenêtré 10 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille pompeuse 18G
- 1 ampoule EPPI 20 ml protégée

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT

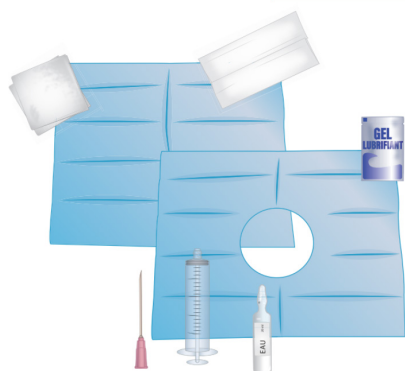

NOS CERTIFICATIONS



INNOSET est certifié par l'organisme notifié LNE-GMED

- NF EN ISO 13485
- ISO 11135 - Stérilisation à l'Oxyde d'Éthylène
- Certification règlement 2017/745 EU-MDR selon l'annexe IX – Chapitres I et 3 limité à l'obtention et au maintien de l'état stérile.

DEHP (DI(2-ÉTHYLHEXYL)PHTHALATE)

Plastifiant couramment utilisé pour assouplir les plastiques comme le PVC. Certains dispositifs médicaux sont désormais sans DEHP, car cette substance peut présenter des risques pour la santé en cas d'exposition prolongée, notamment chez les patients fragiles (nouveau-nés, femmes enceintes, etc.).

POCHE URINAIRE

Réservoir souple servant à collecter l'urine drainée par une sonde. Elle peut être utilisée seule (à connecter à une sonde), ou faire partie d'un système préconnecté. Elle est souvent graduée (pour mesurer les volumes) et équipée d'un robinet de vidange.

POCHE DE VIDANGE

Petite poche utilisée temporairement pour vider une autre poche urinaire, notamment en mobilité ou lors de soins. Elle n'est pas connectée en continu à la sonde, mais sert uniquement à recueillir l'urine lors de la vidange.

SONDE DE FOLEY

Tube souple inséré dans la vessie pour drainer l'urine. Elle est équipée d'un ballonnet gonflable à son extrémité, qui la maintient en place une fois insérée. Utilisée pour les sondages de moyenne ou longue durée.

SONDE DE FOLEY PRÉCONNECTÉE

Sonde urinaire avec ballonnet, déjà reliée à une poche de recueil. Elle est prête à l'usage, ce qui facilite la pose et améliore la sécurité du patient. Le ballonnet permet de maintenir la sonde en place dans la vessie.

ROBINET DE VIDANGE EN T

Dispositif en forme de «T» situé en bas de la poche urinaire, permettant de la vider facilement, sans contact avec l'urine. Il est conçu pour être manipulé simplement et en toute sécurité, même avec des gants.

SYSTÈME URINAIRE PRÉCONNECTÉ

Ensemble prêt à l'emploi composé d'une sonde urinaire déjà connectée à une poche de recueil. Cela évite les manipulations supplémentaires, réduit les risques d'erreur ou d'infection, et fait gagner du temps au personnel soignant.

VALVE ANTIREFLUX

Dispositif intégré dans certaines poches à urine qui joue un rôle essentiel pour la sécurité et le confort du patient. Elle empêche le retour de l'urine ou des gaz depuis la poche vers la sonde urinaire ou la vessie. Cela signifie que :

- ✓ L'urine ne peut circuler que dans un seul sens : de la vessie vers la poche.
- ✗ Elle évite les infections urinaires en empêchant les bactéries de remonter.
- 🌀 Elle bloque aussi les gaz qui pourraient causer des gênes ou des douleurs.

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE

SIÈGE SOCIAL

LAVOREL MEDICARE FRANCE

75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA

840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS

✉ serviceclient@kelis-medical.com

☎ 04 42 18 52 00

Du lundi au vendredi
de 9h à 13h00 et de 14h00 à 17h



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon - Catalogue Edition 2025